


EMS STIMULATOR ZA NOGE

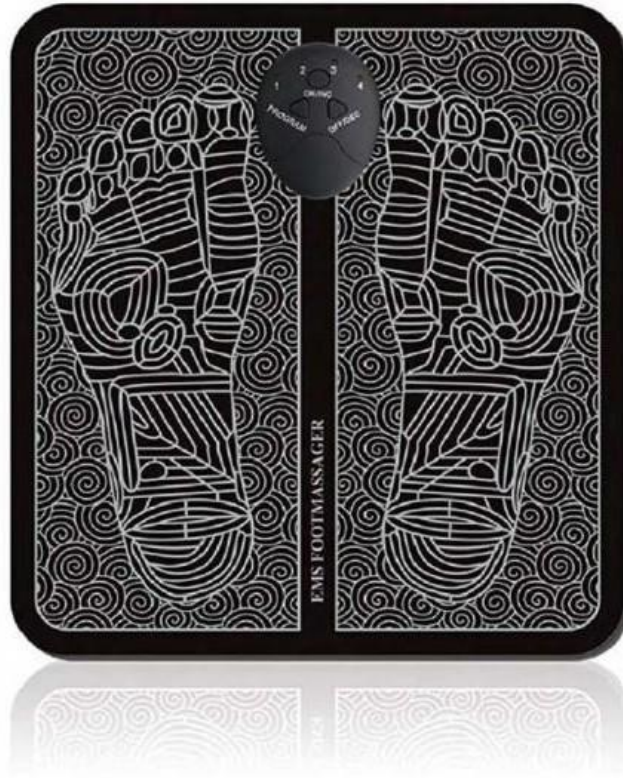

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

EMS stimulator je revolucionarna naprava, ki pospešuje prekrvavitev nog, s tem pa zmanjšuje nabiranje vode, otekanje ter bolečine v nogah. Uporablja se lahko za nego stopal, masažo akupunkturnih točk, aktiviranje ven in lajšanje utrujenosti nog.

Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen bodoče uporabe.

PAKET VSEBUJE

- 1x blazina za stopala
- 1x daljinski upravljalnik
- 1x navodila za uporabo
- 1x letna garancija

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Ime produkta: EMS Foot Massager
- Kapaciteta baterije: polimerna baterija 240mAh
- Velikost izdelka: 32,5 cm x 32,5 cm
- Material: PU usnje, srebrna pasta, bombažna pena
- Barva: črna
- Masažni način: 6 vrst
- Intenzivnost masaže: 10-stopenjska gradientna moč
- Tehnologija EMS: Električna mišična stimulacija (EMS), znana tudi kot nevromuskularna električna stimulacija (NMES), z uporabo električnih impulzov spodbuja krčenje mišic. Impulzi posnemajo akcijski potencial, ki prihaja iz centralnega živčnega sistema, zaradi česar se mišice krčijo. EMS je učinkovito proaktivno orodje za krepitev mišic.

GLAVNE FUNKCIJE

- **Šest masažnih načinov:**

- Z uporabo daljinskega upravljalnika lahko izbirate med šestimi različnimi načini masaže.
- Preklapljanje med različnimi načini omogoča tipka *PROGRAME*.
- Masažni načini so na daljincu prikazani s štirimi rdečimi lučkami. Ko je prižgana prva lučka, stimulator deluje v prvem načinu. Ko je prižgana druga lučka, stimulator deluje v drugem načinu. Ko sta prižgani prvi dve lučki, stimulator deluje v tretjem načinu. Ko je prižgana tretja lučka, stimulator deluje v četrtem načinu. Ko je prižgana četrta lučka, stimulator deluje v petem načinu. Ko sta prižgani zadnji dve lučki, stimulator deluje v šestem načinu.
- Ko izberete ustrezen masažni način, za začetek masiranja pritisnite na tipko *ON/INC*.
- Po 12ih minutah delovanja, se naprava avtomatsko ugasne.

- **Izbira intenzivnosti masaže:**

- Na daljinskem upravljalniku lahko izbirate med desetimi nivoji intenzivnosti masaže, ki jih ponuja vseh šest masažnih načinov.
- Najprej s tipko izberite enega izmed šestih programov. Potem s pritiski na tipko *ON/INC* izberete še stopnjo intenzivnosti. Vsak pritisk pomeni povišanje intenzivnosti.
- Pri prvi uporabi je priporočeno, da izberete najmanjšo intenzivnost. Ob prvi uporabi naj bo torej intenzivnost nastavljena na 1-2 stopnji za 10 minut, šele potem priporočamo višjo intenzivnost.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Pred uporabo si obrišite stopala. Če med uporabo začutite mravljinčenje ali nelagodje, je morda vzrok v presuhih stopalih. Prosimo vas, da v tem primeru namočite stopala v vročo vodo, ter jih nato obrišete in ponovno istočasno položite na blazino.
2. Blazino za stopala razgrnite in položite na tla.
3. Pritrdite daljinski upravljalnik na blazino.
4. Bosa stopala istočasno položite na blazino. Ta naprava vsebuje EMS mikro pulzno tehnologijo. Za pravilno delovanje stimulatorja, je potrebno obe stopali na blazino položiti kar se da istočasno.
5. Za vklop pritisnite in držite gumb *ON/INC* približno 2 sekundi.

6. Po vklopu lahko začnete z masažo. S pritiskom na gumb *PROGRAME* prilagodite način in intenzivnost, ki ju potrebujete.
7. Med uporabo bo lučka utripala s hitrostjo intenzivnosti masiranja.
8. Ko želite napravo izklopiti, pritisnite in pridržite stikalo *OFF/DEC* za približno 2 sekundi.



OPOZORILO!

- Pred prvo uporabo natančno preberite navodila ter jih dosledno upoštevajte.
- Pred prvo uporabo napolnite daljinski upravljalnik EMS stimulatorja. Podrobnosti si lahko preberete pod točko *Polnjenje*.
- Izdelek ni vodoodporen, zato ga ne umivajte pod vodo. Poleg tega ga ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je na primer kopalnica.
- Naprava ne sme priti v kontakt s kovinskimi predmeti, kot so na primer nakit in zanka na pasu.
- V primeru rane na območju masiranja, naprave do popolnega zaceljenja rane ne uporabljajte.
- Stimulatorja ne smejo uporabljati nosečnice, bolniki s srčnimi boleznimi, bolniki s povišanim krvnim pritiskom, bolniki z globoko vensko trombozo (DVT) in bolniki z vsadnim kardiovertnim defibrilatorjem.
- Naprava je namenjena zgolj za fizično terapijo. V primeru nediagnosticirane bolečine, naprave ne uporabljajte v namen odpravljanja tovrstne bolečine.

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrizanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjstvi odpadki po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjstvih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.