

APARAT DE MASAJ PENTRU TERAPIE CUPPING
INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE



Prezentarea produsului

Acest produs combină funcțiile de suucțiune inteligentă, încălzire cu lumină roșie, presiunea punctelor de acupunctură etc. și efectuează o aspirare dinamică cu monitorizare inteligentă a presiunii din rezervor și ajustarea în timp real a vidului. Este un produs recomandat pentru birou, acasă sau drept cadou.



Produs	6 moduri posibile	6 trepte de viteză	12 trepte de viteză pentru umplere și depresurizare
Model	DS-A21	DS-A22	DS-A23
Mărime produs	90mm*90mm*78mm	90mm*90mm*78mm	90mm*90mm*78mm
Tensiune de încărcare	/	5V 2A	5V 2A
Puterea de aspirare	-60~0kPa	-60~0kPa	-60~0kPa
Putere nominală	5W	5W	5W
Standard de performanță	GB4706.1 – 2005	GB4706.10 – 2008	

Instrucțiuni de operare

Pregătirea înainte de utilizare

1. Vă rugăm să citiți cu atenție măsurile de siguranță înainte să utilizați acest produs. Dacă nu se respectă condițiile de utilizare, utilizarea acestui produs este interzisă.
2. Se recomandă curățarea și hidratarea pielii cu un prosop umed sau pulverizant pentru a îmbunătăți efectul după utilizare.
3. Strângeți și instalați recipientul transparent (ștergeți instrumentul cu un prosop umed înainte și după utilizare).
4. Verificați, ca instrumentul să fie complet și în stare normală.

Putere/mod

1. Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 1,5 secunde pentru a porni aparatul. Ecranul LCD va afișa o numărătoare inversă de 20 de minute, iar indicatorul de temperatură se va aprinde. Aparatul este echipat cu un cronometru și se oprește automat după 20 de minute.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 1,5 secunde pentru a opri aparatul, acum ecranul LCD și indicatorul de temperatură se vor stinge.
3. În starea de pornire, apăsați scurt butonul pentru a schimba modul. Dispozitivul are două moduri, și anume modul de presiune negativă profundă (sucțiune) și modul de masaj relaxant.
4. Modul de pornire implicit este modul de vid profund, iar funcția de vid și funcția de încălzire sunt activate automat.

Puterea de sucțiune

1. La pornire, puterea implicită este treapta a treia.
2. Setați puterea de aspirație cu o apăsare scurtă a butonului (modelele DS-A21 și DS-A22 au 0-6 trepte, modelul DS-A23 are 0-12 trepte, treapta 0 este oprirea sucțiunii).
3. Fiecare apăsare scurtă schimbă o treaptă în sus, ecranul LCD afișează treapta de putere corespunzătoare și după 1 secundă este afișată din nou numărătoare inversă de 20 de minute.
4. Când intensitatea atinge cea mai mare treaptă de viteză, apăsați din nou scurt pentru a reveni la treapta 0 și dezactivarea funcției de presiune negativă (sucțiune).

5. La prima utilizare sau în cazul în care pielea nu este adaptată, se recomandă folosirea începând cu treapta 1.

Controlul temperaturii

1. Temperatura implicită este treapta 3, lumina roșie din partea de jos este aprinsă și puteți regla temperatura printr-o apăsare scurtă (modelele DS-A21, DS-A22 au 0-6 trepte, modelul DS-A23 are 0-12 trepte, iar treapta 0 înseamnă funcția de încălzire oprită).
2. Când temperatura dispozitivului DS-A23 atinge treapta a noua, culoarea indicatorului de temperatură începe să se schimbe într-o lumină colorată și clipește; cu cât temperatura este mai mare, cu atât lumina colorată clipește mai repede.
3. Când temperatura atinge cea mai înaltă treaptă, apăsați scurt butonul pentru a opri funcția de încălzire (treapta 0), indicatorul de temperatură și lumina roșie din partea de jos se va stinge.

Reducerea presiunii / pauză


Modelele DS-A21 și DS-A22: Dacă doriți să opriți aparatul în timpul lucrului, apăsați scurt acest buton pentru a opri funcționarea și a trece în modul de așteptare.

DS-A23: În timpul funcționării, dacă doriți să opriți sau să îndepărtați aparatul, apăsați scurt această tastă pentru a opri sucțiunea. Funcția de presiune negativă a rezervorului și reducerea presiunii vor face posibil ridicarea cu ușurință a rezervorului și aparatul va intra în mod de așteptare.

Notă:

1. Când utilizați acest aparat cu produse periferice lichide, cum ar fi uleiul esențial, vă rugăm să vă asigurați că uleiul esențial rămâne pe piele. Când suprafața pielii este acoperită uniform și nu există lichid evident, puneți aparatul în poziția dorită.
2. Aparatul este proiectat cu un dispozitiv de filtrare care poate filtra majoritatea particulelor în procesul de utilizare a produsului sau a impurităților lichide pentru a proteja interiorul carcsei și pentru a prelungi durata de viață a produsului. Vă rugăm să îl utilizați în funcție de frecvența nevoilor dumneavoastră personale, să verificați și să înlocuiți filtrul de bumbac în mod regulat.

deșurubați
carcasa
transparentă
a cutiei.

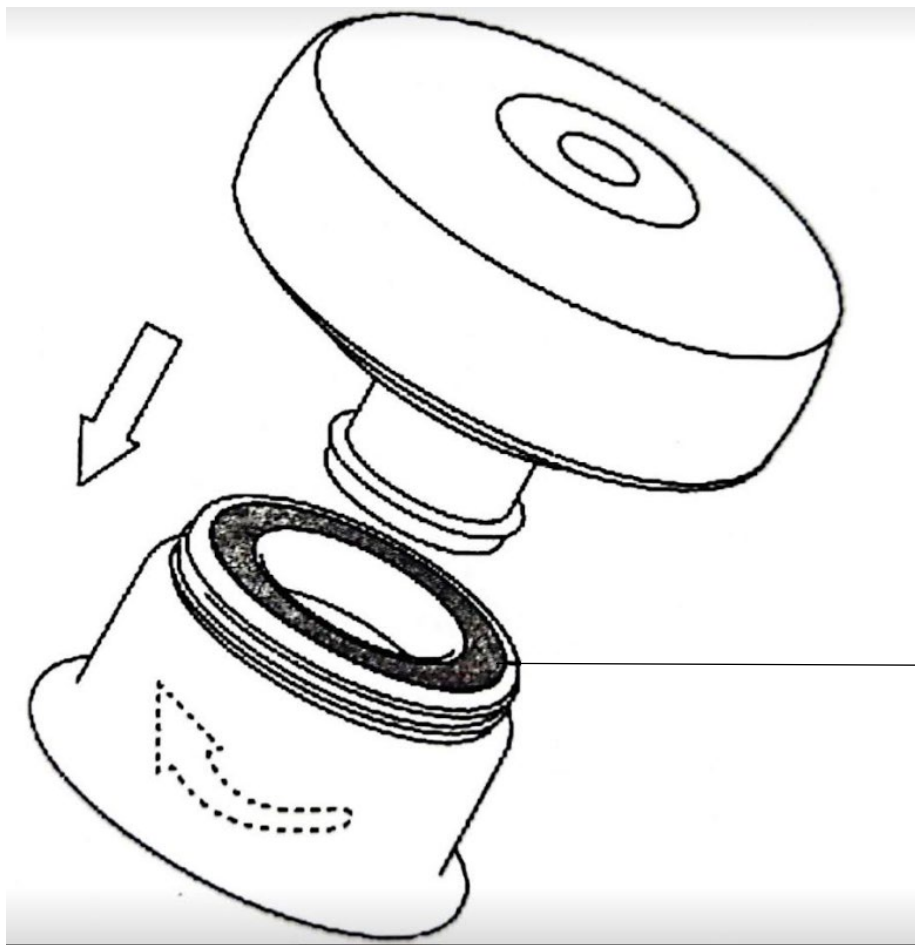

Filtru bumbac

După înlocuirea filtrului de bumbac inclus, curățați și reinstalați cupa transparentă al cutiei.

Instrucțiuni de încărcare

1. Conectați cablul de încărcare de tip C în mufa adaptorului și celălalt capăt la interfața de încărcare a produsului pentru a începe încărcarea. Caracteristici adaptor: 5V - 2A.
2. Păstrați portul de încărcare de tip C uscat și curat în timpul încărcării. Timpul de încărcare poate varia ușor în funcția condițiilor de mediu. Nu încărcăți mai mult de 8 ore.
3. Indicatorul alb clipește în timpul încărcării și se stinge după încărcarea completă.
4. Produsul nu poate fi utilizat în timpul încărcării.

Măsuri de siguranță



PERICOL (conținut legat de vătămări corporale grave din cauza defecțiunii posibile)

Nu îl utilizați în același timp cu următoarele echipamente electronice medicale, deoarece acestea ar putea cauza defecțiuni sau deteriorarea instrumentelor medicale care pot pune viața în pericol grav!

1. dispozitive electronice medicale implantabile, cum ar fi stimulatoarele cardiace,
2. dispozitive electronice medicale de susținere a vieții, cum ar fi inima și plămânii artificiali,
3. electrocardiograf și alte instrumente electronice medicale,
4. la pacienți cu alte implanturi medicale.

Pentru a evita accidentele și neplăcerile, nu utilizați produsul în următoarele circumstanțe:

1. Pacienții însărcinate, în timpul menstruației, piele deteriorată, vene varicoase și persoane care iau medicamente,
2. pacienții cu boli infecțioase, sensibilitate cutanată, pacienți postoperatori, febră mare sau boli critice,
3. Pacienți cu tumoare malignă sau leziuni locale și ulcer, fractură traumatică, inflamație purulentă acută, pacienți cu pierdere a elasticității de piele
4. pacienți cu inimă anormală, nervi cranieni și tensiune arterială,
5. nevroticism sever, convulsii și anxietate sau panică,
6. boli predispuse la sângerare, cum ar fi trombocitopenia, leucemia, hemofilia, purpura Henoch Schonlein și alte boli în care pacientul suferă de sângerare,
7. este interzis folosirea aparatului în apropierea inimii, a feței, a părților intime sau a vaselor de sânge mari de pe suprafața corpului,
8. pacienți cu percepție afectată a pielii sau piele anormală,
9. persoane sub tratament medical sau cei care nu se simt sănătoase fizic,
10. oboseală excesivă, beție și somn prea târziu (de asemenea, sunt interzise tratamentele cu 2 ore înainte și după masă),
11. pacienții a căror piele este alergică la metale și lumina roșie,
12. produsul are o suprafață de încălzire, nu se utilizează de persoane fără sensibilitate de căldură, de copii care nu își pot exprima dorințele sau nu sunt capabili de un management independent.



ATENȚIE (conținut legat de vătămări corporale grave din cauza defecțiunii)

1. Utilizați produsul corect conform instrucțiunilor de utilizare.
2. Când utilizați produsul, cupa transparentă trebuie să fie strâns atașată de piele și în contact uniform, evitând contactul cu răni și cicatrici.
3. Aceeași parte a acestui produs poate provoca arsuri la temperatură scăzută sau încordare a pielii atunci când este utilizat pentru o perioadă lungă de timp. Vă rugăm să aveți grijă la utilizare.
4. Dacă vă simțiți rău în timpul sau după utilizare, opriți aparatul imediat și consultați un medic.
5. Este recomandat folosirea de un singur utilizator. Când aveți utilizatori multiple, vă rugăm să scoateți și să curățați recipientul transparent înainte de reutilizare.
6. Nu utilizați cupa transparentă dacă este deformată sau deteriorată.

7. După utilizarea acestui produs pot apărea roșeață sau echimoză, ceea ce este normal și de obicei dispare în mod natural în 2 zile (diferă în funcție de tipul de piele).
8. Când produsul funcționează pentru o lungă perioadă de timp, va exista încălzire la suprafață, ceea ce este un fenomen normal.
9. În caz de nereguli, opriți imediat aparatul imediat.
10. Nu utilizați acest produs în timp ce conduceți.
11. Pentru a preveni șocurile electrice sau accidentele, nu vă atingeți de cablul de încărcare USB cu mâinile ude.
12. Acest produs are baterie cu litiu. Vă rugăm să nu dezamblați aparatul, nu încercați să-l modificați, să nu-l băgați în apă și să nu-l aruncați în foc, pentru a preveni deteriorarea și explozia produsului.
13. După utilizare, vasele de sânge de la suprafața pielii se vor dilata. Odihniți-vă timp de 45 de minute înainte de a face baie.

Curățare și mentenanță

Urmați metodele de curățare și întreținere pentru a prelungi durata de viață a instrumentului:

1. Ștergeți carcasa cu o cârpă uscată nemetalică. Nu utilizați detergent acid - bazic, alcool, diluant, benzină, nu curățați cu solvent cum ar fi un agent de îndepărtare a lacului de unghii.
2. După fiecare utilizare, deconectați de la sursa de alimentare și curățați aparatul (cu un prosop umed).
3. Depozitați produsul într-un loc sigur și uscat.
4. Nu lăsați aparatul în funcțiune în apropierea mediilor umede.
5. Nu folosiți o perie tare sau o bilă din oțel inoxidabil în timpul curățării, pentru acestea pot deteriora suprafața.
6. Nu folosiți apă sau alte lichide pentru spălarea părților de sucțiune.
7. Când produsul este folosit pentru o perioadă mai lungă de timp, vă rugăm să-l încărcați în mod regulat pentru a asigura funcționarea lui normală.

Nu utilizați și nu depozitați acest produs în următoarele locații:

1. Locuri care sunt sensibile la vibrații și impact,
2. locuri cu lumina directă a soarelui,
3. locuri calde și umede,
4. locuri umede,
5. câmp electromagnetic puternic,
6. lângă produse pirotehnice,
7. locuri accesibile copiilor, etc...

Analiza erorilor și depanare

Apariția unei erori	Evaluarea și rezolvarea erorilor
Nu se poate porni	<ol style="list-style-type: none">1. Pentru a porni, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire mai mult de 1,5 secunde.2. Încărcați dispozitivul și încercați din nou.
Nu se poate încărca	<ol style="list-style-type: none">3. Înlocuiți adaptorul cu o priză standard și încercați din nou.1. Scoateți capul de încărcare din mufă și reconectați-l, verificați dacă este bine conectat.2. Verificați capul de încărcare și portul de încărcare, să nu fie murdare sau blocate. Dacă sunt, curățați-le.3. Înlocuiți adaptorul sau cablul de încărcare.
Sucțiune slabă	<ol style="list-style-type: none">1. Scoateți recipientul transparent și strângeți-l din nou pentru a-l fixa.2. Verificați, ca orificiile de admisie și evacuare a aerului să nu fie blocate.3. Verificați dacă bumbacul filtrului trebuie înlocuit.
Percepție slabă a temperaturii	<ol style="list-style-type: none">1. Verificați dacă funcția de temperatură este activată și dacă indicatorul de temperatură este aprins.2. Datorită influenței temperaturii ambientale, creșteți treapta de temperatură.3. Dacă bateria este descărcată, încărcați-o.



Dacă problema nu poate fi rezolvată, nu dezamblați dispozitivul fără permisiune.

Aducere aminte

1. Când îl utilizați pentru prima dată, acordați atenție ajustării treptate pentru a găsi modul și intensitatea adecvată.
2. În modul de presiune negativă profundă, dacă sucțiunea atinge un anumit nivel, apăsați tasta de eliberare a presiunii / pauză din timp pentru a opri funcționarea sau eliberați presiunea pentru a evita problemele pielii.

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.