



GANZKÖRPERMASSAGER: BEDIENUNGSANLEITUNG

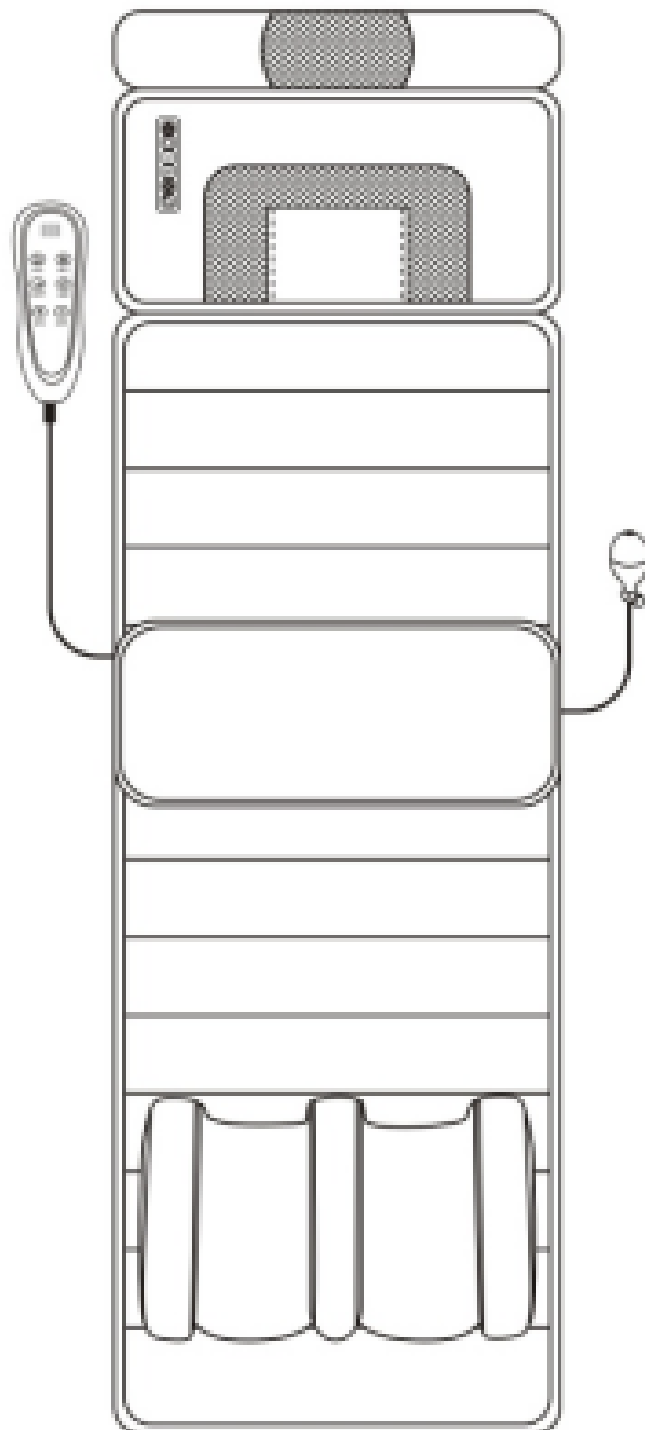

Exekutive: GB4706.1-2005
Standard: GB4706.10-2008
Spannung: 12 V
Wutleistung: 24 W

VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Produkt wurde strengen Tests unterzogen und hat sich als sicher und zuverlässig erwiesen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, damit Sie die korrekte Verwendung beherrschen. Achten Sie beim Lesen besonders auf wichtige Sicherheitswarnungen und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf. P.S.: Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Design und die Erklärung des Produkts zu ändern. Wir entschuldigen uns, wenn ohne Vorankündigung Änderungen vorgenommen werden; Maßgeblich ist jedoch das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts.

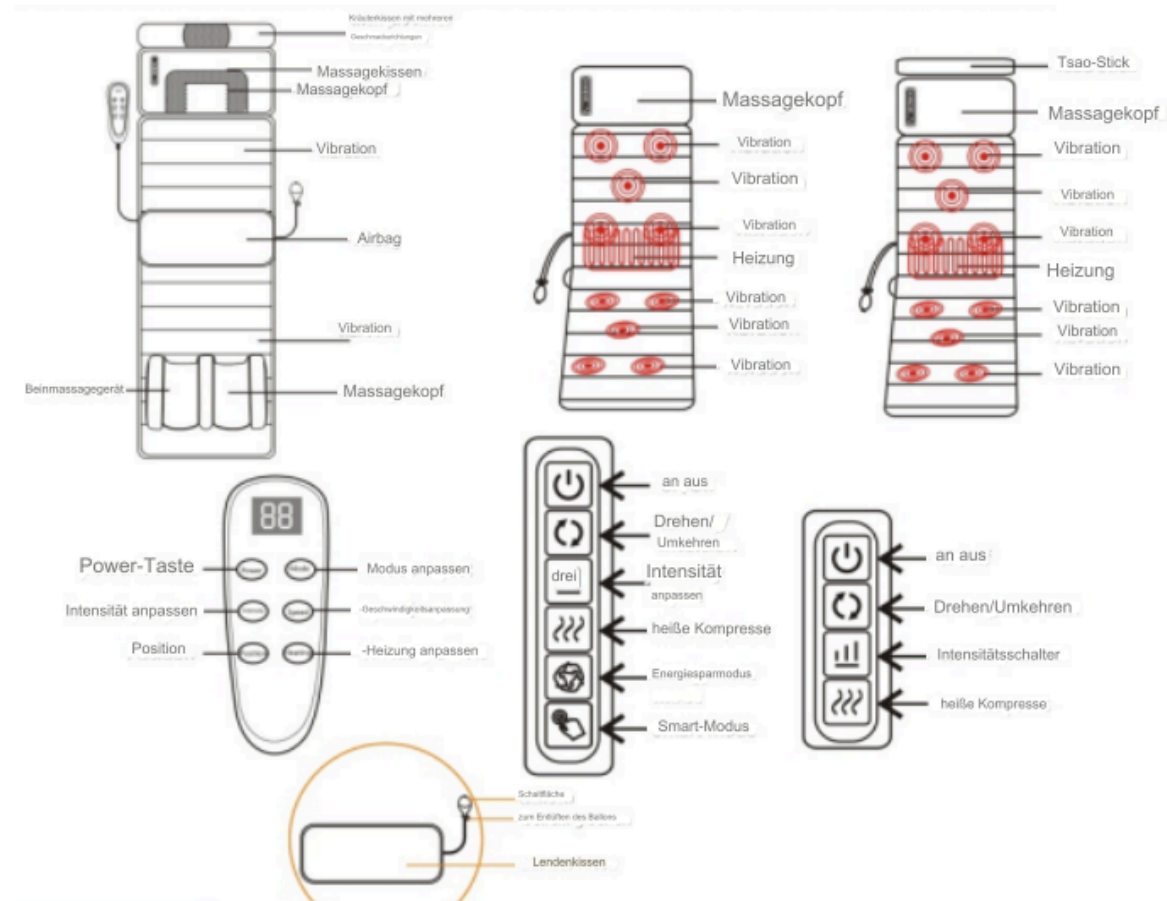

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Power/Timer: Drücken Sie zum Einschalten die Power-Taste am Controller. Drücken Sie erneut, um den Timer auf 10 Minuten / 20 Minuten / 30 Minuten einzustellen.

Modusauswahl: Verwenden Sie die Modustaste auf dem Controller, um aus 9 Massagemodi auszuwählen.

Intensitätseinstellung: Drücken Sie die Intensitätstaste auf dem Controller, um aus 9 Massageintensitätsstufen auszuwählen.

Positionsanpassung: Verwenden Sie die Positionstaste auf dem Controller, um Schulter, Rücken, Arm und Bein nach Ihren Wünschen zu massieren.

WARNHINWEISE

1. Elektrische Sicherheit:

- Tauchen Sie das Massagegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Massagegeräts in der Nähe von Wasser oder beim Baden.
- Trennen Sie das Massagegerät vom Netz, wenn es nicht verwendet wird und bevor Sie es reinigen.

2. Hitzewarnung:

- Dieses Massagegerät erzeugt Wärme. Vermeiden Sie eine längere Exposition, um Hautreizungen oder Verbrennungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Massagegerät nicht, wenn die Wärmefunktion nicht funktioniert.

3. Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung:

- Verwenden Sie das Massagegerät nicht bei offenen Wunden, Prellungen, geschwollenen oder entzündeten Stellen oder Stellen mit Hauterkrankungen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Druck ausüben, insbesondere auf empfindliche Bereiche oder Knochenvorsprünge.
- Vermeiden Sie es, das Massagegerät über einen längeren Zeitraum ohne Pausen zu verwenden.

4. Gesundheitsaspekte:

- Konsultieren Sie vor der Verwendung des Massagegeräts einen Arzt, wenn Sie gesundheitliche Beschwerden oder Bedenken haben.
- Stellen Sie die Anwendung ein und wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie während oder nach der Anwendung Beschwerden oder Nebenwirkungen verspüren.

5. Kinder und Haustiere:

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Massagegerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt.
- Lassen Sie während des Betriebs keine Haustiere in die Nähe des Massagegeräts.

6. Korrekte Nutzung:

- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung, bevor Sie das Massagegerät verwenden.
- Benutzen Sie das Massagegerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Modifizieren Sie das Massagegerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.

7. Lagerung und Handhabung:

- Bewahren Sie das Massagegerät an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.
- Wickeln Sie das Netzkabel beim Aufbewahren nicht fest um das Massagegerät.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Massagegerät um, um Schäden zu vermeiden.

8. Warnung vor Überbeanspruchung:

- Eine übermäßige Verwendung des Massagegeräts kann zu Muskelermüdung oder Verletzungen führen. In Maßen verwenden.

9. Stromversorgung:

- Verwenden Sie zum Laden oder Betreiben des Massagegeräts ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdose mit den Spannungsanforderungen des Massagegeräts kompatibel ist.

10. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen:

- Betreiben Sie das Massagegerät nicht, wenn es beschädigt erscheint oder wenn das Netzkabel ausgefranst oder beschädigt ist.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Massagegeräts in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Benutzen Sie das Massagegerät nicht, wenn Sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen.

EINFACHE FEHLERANALYSE UND -BEHANDLUNG

Wenn die Massagematratze nicht funktioniert oder nicht verwendet werden kann, ziehen Sie den Adapter ab. Benutzer sollten nicht versuchen, die Massagematratze selbst zu zerlegen oder zu reparieren.

Entsorgen Sie das Massagegerät gemäß den örtlichen Recyclingrichtlinien. Entfernen Sie Batterien/elektrische Komponenten. Erwägen Sie das Recycling von Elektroschrott. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Vermeiden Sie die Entsorgung auf Mülldeponien/Verbrennungsanlagen.