


EMS foot massager instruction manual

ES




Foot pad LCD model

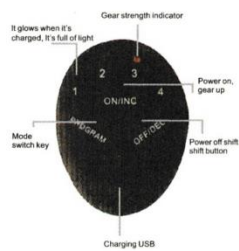

Töltőegység (az akkumulátor ugyanazt csinálja) (6 mód, 10 fokozat)

LCD modell (8 mód, 19 fokozat)

1. Egy óra elteltével körülbelül 160 percig használható töltés. Minél nagyobb az intenzitás, annál nagyobb a teljesítmény fogyasztás lesz. Felhívjuk figyelmét, hogy közben nem használhatja töltés, és csak töltés után használható.
2. Ne hagyja el a lábát, különben automatikusan kikapcsol. Tegye fel a lábát, és nyomja meg a bekapcsológombot. Kérjük, legyen ügyeljen arra, hogy ne viseljen zoknit, és vegye ki a műanyag zacskót. Nem egy lábbal hagyja el, különben automatikusan leáll. Ne felejtse el kihúzni a töltés után, különben nem képes indítani.
3. A fő egység gombja a szőnyegen van csatolva li ke a gomb. Vegye le a zoknit, és tegye a lábát a lábnyom. Nyomja meg a „+” gombot a gép bekapcsolásához és kétszer nyomja meg/intensify.."gomb csökkentett intenzitást jelez/leállás m jelzi kapcsolási mód.

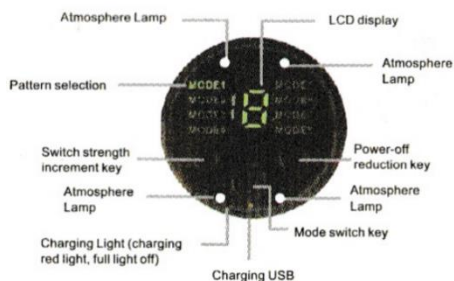

(8 mode 19 gear)

Mi az EMS technológia?

Az elektromos izomstimuláció (EMS), más néven neuromuszkuláris elektromos stimuláció, elektromos impulzusokat használ az indukálásra többszörös izomösszehúzódások. A központi idegrendszer összehúzza az izmokat; Az EMS aktívnak bizonyult izomerősítő eszköz.

Mi az EMS célja?

Izomerősítés

Enyhítse a fájdalmat

Megakadályozza az izomsorvadás elvesztését

Lazítsa el az izmait

Izomlazítás

Szépség kondicionálás


Tedd érdekessé az életet

Naponta egyszer ajánlom, jó segítő a vérkeringésben!

A gazdagép használati módja

A stimuláció intenzitása 19 szintre oszlik (intenzitás 0-19 szint) Amikor először használja, állítson be alacsonyabb erősséget, majd alkalmazkodva az alacsony erősséghez, kérjük, végezzen hibakeresést más erősségeknél.

Ahogy az akkumulátor fennmaradó kapacitása fokozatosan csökken, az aktuális stimuláció is fokozatosan gyengülni fog. ha továbbra is használja, töltse fel a főt egység számítógép.

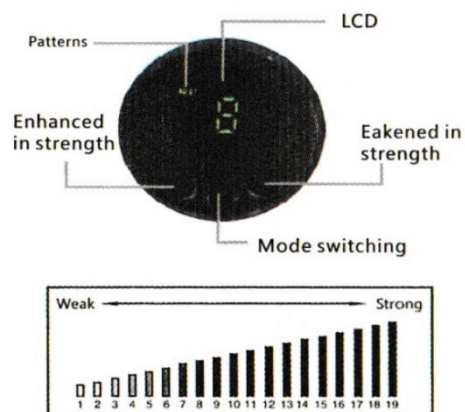

(8 mód)

Amikor a gépet 1-19 szintre kapcsolja, 15 percenként automatikusan leáll.

(19 fokozatú beállítás) Ha használaton kívül 1-19 szintre kapcsolja, 5 másodpercen belül automatikusan 0 szintre kapcsol, majd automatikusan kikapcsol 0. szintre 20 másodperc alatt. A piros lámpa akkor világít töltés (kb. 1-2 óra) A piros lámpa kialszik ki, ha tele van.

(6 mód 9 fokozat)

Kérjük, állítson be alacsonyabb intenzitást, amikor először használja időt, és az alacsony intenzitáshoz való alkalmazkodás után állítsa be. Összesen 6 mód van, a részletekért lásd: a következő masszírozó üzemmód útmutatót.