




Nabíjacia jednotka (batéria robí to isté) (6 režimov, 10 prevodových stupňov)

LCD model (8 režimov, 19 úrovní)

1. Môže sa používať asi 160 minút po jednej hodine nabíjanie. Čím väčšia intenzita, tým väčší výkon spotreba bude. Upozorňujeme, že ho nemôžete používať počas nabíjania a možno ho použiť až po nabití.
2. Nenechávajte nohy, inak sa automaticky vypne. Zdvihnite nohy a stlačte tlačidlo napájania. Prosím buď dávajte pozor, aby ste nenosili ponožky a odstráňte plastové vrecko. nie odíďte s jednou nohou, inak sa automaticky vypne. Po nabití ho nezabudnite odpojiť, inak to nebude schopný naštartovať.
3. Tlačidlo hlavnej jednotky je pripevnené na podložke ako a tlačidlo. Vyzlečte si ponožky a položte si nohy na stopa. Stlačením tlačidla "+" zapnite stroj a dvakrát stlačiť/zosilniť". "tlačidlo indikuje zníženú intenzitu/vypnutie m indikuje režim prepínania.

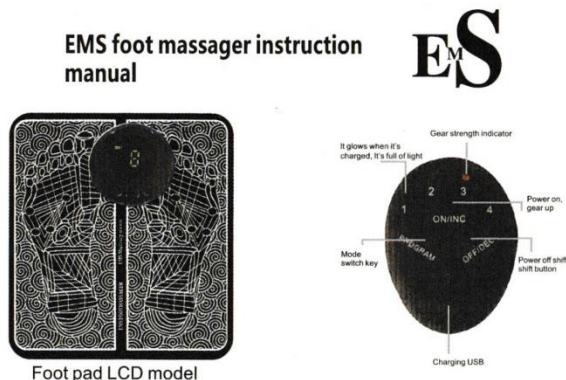

(8 mode 19 gear)

Čo je technológia EMS?

Elektrická svalová stimulácia (EMS), tiež známa ako neuromuskulárna elektrická stimulácia, využíva na vyvolanie elektrický impulz viacnásobné svalové kontrakcie. Centrálny nervový systém sťahuje svaly; Ukázalo sa, že EMS je aktívny nástroj na posilnenie svalov.

Aký je účel EMS?

Posilňovanie svalov

Zbavte sa bolesti

Zabráňte chradnutiu svalovej atrofie

Uvoľnite svaly

Uvoľnenie svalov

Kondicionovanie krásy


Urobte život zaujímavým

Odporúča sa raz denne, dobrý pomocník pre krvný obeh!

Spôsob použitia hostiteľa

Intenzita stimulácie je rozdelená do 19 úrovní (intenzita 0-19 úrovní) Pri prvom použití nastavte nižšiu intenzitu a po prispôsobte sa nízkej sile, odladíte iné silné stránky.

S postupným znižovaním zostávajúcej kapacity batérie dochádza k súčasnej stimulácii bude tiež postupne slabnúť. ak ho budete naďalej používať, nabíjate hlavný zdroj jednotkový počítač.

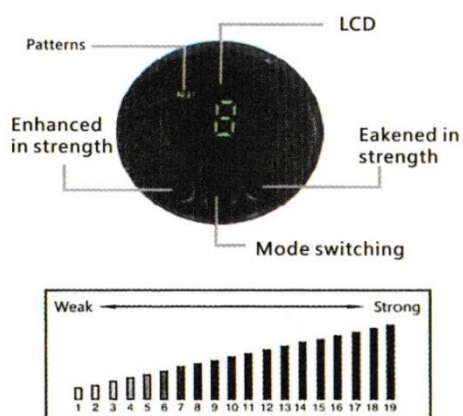

(8 režimov)

Keď sa stroj prepne na úroveň 1-19, automaticky sa vypne každých 15 minút.

(19 úrovní nastavenia) Ak sa prepne na úroveň 1-19, keď sa nepoužíva, automaticky sa prepne na úroveň 0 za 5 sekúnd a automaticky sa vypne po úroveň 0 za 20 sekúnd. Keď svieti červené svetlo nabíjanie (asi 1-2 hodiny) Červená kontrolka zhasne von, keď je plná.

(6 režimov 9 prevodových stupňov)

Pri prvom použití nastavte nižšiu intenzitu čas a upravte ho po prispôsobení nízkej intenzite. Celkovo je k dispozícii 6 režimov. Podrobnosti nájdete v časti nasledujúceho sprievodcu režimom maséra.